

HIGH QUALITY & GENUINE PRODUCT

FUJIKASHI



USER MANUAL

MASSAGE CHAIR FJ-2500

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model No	FJ-2500
Điện áp	220-240V
Tần suất định mức	50 - 60Hz
Công suất tiêu thụ	150W
Kích thước	Đứng thẳng 1380 (L) x 780 (W) x 1150 (H) mm Ngả ghế 1660 (L) x 780 (W) x 820 (H) mm
Kích thước đóng gói	1500 (L) x 800 (W) x 890 (H) mm
Trọng lượng tịnh / Khối lượng	76/84 kg

LỜI CẢM ƠN

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm của Fujikashi cho việc nâng cao sức khỏe của bạn và gia đình. Tất cả các sản phẩm của Fujikashi đã được kiểm tra và chứng nhận là an toàn và đáng tin cậy. Xin vui lòng đọc sách hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận để sử dụng, vận hành máy một cách chính xác.

Bảo trì & Bảo dưỡng**Mục Lục****Làm sạch**

1. Không sử dụng búi thép, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc chất lỏng ăn mòn (như xăng hoặc acetone) để làm sạch sản phẩm.
2. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
3. Lau sạch sản phẩm, điều khiển và dây nguồn với khăn khô.
4. Không sử dụng vải ẩm hoặc chất tẩy rửa.

Lưu trữ

1. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
2. Lưu giữ sản phẩm ở nơi khô mát, tránh xa ánh nắng mặt trời.
3. Không đặt vật nặng lên trên sản phẩm.

Nếu lớp bọc bị hư hỏng hoặc có lỗi kỹ thuật nào, vui lòng dừng sử dụng sản phẩm. Hãy liên lạc với nhà cung ứng ngay lập tức.

Chỉ dẫn an toàn	1-2
Mô tả sản phẩm	3-4
Chuẩn bị trước khi sử dụng	5-6
Điều khiển	7
Hướng dẫn vận hành	8-9
Xử lý vấn đề	10
Bảo trì & Bảo dưỡng	11
Thông số kỹ thuật	12

Chỉ dẫn an toàn

- Những người trong các trường hợp dưới đây nên tham khảo ý kiến của bác sỹ trước khi sử dụng sản phẩm:
 - Người sử dụng thiết bị y tế điện tử, gắn liền với cơ thể, VD: máy kích nhịp tim.
 - Người có bệnh tim
 - Người có bệnh nặng về cột sống.
 - Người có bệnh xương dễ gãy, đặc biệt là xương cột sống.
 - Bệnh nhân vừa được phẫu thuật xong.
 - Người đang mang thai, hoặc sau quá trình điều trị bệnh.
 - Người đang có khối u ác tính
 - Người mắc chứng loãng xương
 - Người có khuyết tật bất thường về xương cột sống
- Lưu ý: Không nên massage những phần cơ thể bị sưng hoặc viêm.
- Không để nước dây vào sản phẩm hoặc bắn lên bề mặt sản phẩm.
- Nước dây vào dây điện sẽ gây nguy hiểm. Vui lòng không để sản phẩm trong môi trường ẩm ướt (như nhà tắm, phòng tắm hơi hoặc cạnh bể bơi).
- Trước khi kết nối sản phẩm với nguồn điện, vui lòng đảm bảo điện áp của sản phẩm và điện áp cung ứng giống nhau.
- Nếu giắc cắm điện, dây nguồn hoặc sản phẩm bị hư hại, không được sử dụng sản phẩm.
- Để tránh rủi ro sốc điện, không tự ý mở vỏ ngoài của sản phẩm.
- Sản phẩm không dành cho người tâm thần không ổn định, khuyết tật, trừ khi có sự giám sát và hướng dẫn của người chịu trách nhiệm cho an toàn của họ khi sử dụng sản phẩm.
- Nếu sản phẩm hoặc dây nguồn bị hư hại, để tránh nguy hiểm, không được thử sửa chữa sản phẩm, việc sửa chữa cần được tiến hành bởi kỹ thuật viên/chuyên gia có kinh nghiệm.
- Trẻ em không nên sử dụng sản phẩm này. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không đùa nghịch với sản phẩm.
- Nếu tiếng động lạ phát ra từ sản phẩm, hãy tắt nguồn điện và rút phích cắm ra khỏi ổ điện ngay. Vui lòng liên hệ đại lý phân phối gần nhất để được hỗ trợ.
- Không nên sử dụng sản phẩm nếu lớp bọc bị hư hại hoặc nếu có lỗi kỹ thuật hoặc điện tử nào, vui lòng liên hệ đại lý phân phối gần nhất để được hỗ trợ.
- Chỉ nên đặt sản phẩm ở nơi thích hợp, đã được nêu trong hướng dẫn sử dụng.
- Không sử dụng sản phẩm trong điều kiện ẩm ướt, nhiệt độ cao hoặc cạnh các vật tỏa nhiệt nóng như lò nướng, bếp.
- Không nên bôi kem mỹ phẩm hoặc thuốc lên sản phẩm hoặc lên cơ thể trước hoặc trong khi sử dụng sản phẩm.
- Khi massage cổ hoặc gáy, hãy chú ý tới chuyển động của con lăn và tránh việc cường độ massage quá mạnh.
- Không tiêu hủy, gấp, kéo dãn, xoắn hoặc buộc dây nguồn. Dây nguồn bị hư hại có thể gây ra hỏa hoạn hoặc sốc điện.
- Không sử dụng sản phẩm trực tiếp trên da.

Xử lý vấn đề

Trang sau tổng hợp các vấn đề phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải với sản phẩm này. Nếu bạn không thể xử lý vấn đề với những thông tin bên dưới, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc đại lý gần nhất.

Vấn Đề	Nguyên Nhân Có Thể Xảy Ra	Gợi Ý Khắc Phục
Sản phẩm không hoạt động	Sản phẩm không được kết nối nguồn điện đúng cách	Đảm bảo điện áp trên sản phẩm tương thích với điện áp nguồn và cắm điện lại một lần nữa. Sau đó bật công tắc điện.
	Kết thúc chương trình massage tự động 15 phút và tự động chuyển sang chế độ tạm dừng.	Nếu bạn muốn một đợt massage nữa, vui lòng ấn phím ON/OFF.
	Bạn có thể đã sử dụng sản phẩm liên tục trong hơn 45 phút và chế độ bảo vệ quá tải đã được kích hoạt.	Rút phích cắm sản phẩm và để sản phẩm giảm nhiệt trong 60 phút trước khi sử dụng lại.
	Sản phẩm chịu quá tải trọng.	Giảm tải trọng quá tải và khởi động lại.
Sản phẩm quá nóng	Sản phẩm có thể đã bị sử dụng quá lâu.	Rút phích cắm sản phẩm và để sản phẩm giảm nhiệt trong 60 phút trước khi sử dụng lại.
Tiếng ồn có thể nghe thấy từ sản phẩm	Tiếng ồn được tạo ra từ các bộ phận cơ khí của sản phẩm.	Điều này là bình thường và sản phẩm không bị lỗi.

**Nút Massage không trọng lực**

Bằng cách nhấn nút này để mô phỏng trạng thái không trọng lực ngoài vũ trụ. Cơ thể sẽ ở trong trạng thái thoải mái tự nhiên. Có 3 góc. Giải tỏa căng thẳng về thể chất và tinh thần.

**Nút Chương trình Massage thủ công**

5 chế độ massage thủ công: Xoa bóp -> Đấm -> Kết hợp (Đấm & Bóp) -> Trị liệu kiểu Nhật -> Miết dọc.

**Điều chỉnh độ rộng massage**

Nhấn để điều chỉnh độ rộng cơ chế con lăn massage. Có 3 độ rộng để lựa chọn.

**Lựa chọn massage túi khí**

Nhấn để lựa chọn vị trí massage túi khí.

**Điều chỉnh tốc độ massage**

Nhấn để điều chỉnh tốc độ massage (3 tốc độ có thể điều chỉnh).

**Nút Massage từng phần**

Nút này chỉ có thể áp dụng với thiết lập thủ công.

Nhấn nút này để thay đổi khu vực massage đến từng vùng massage cụ thể.

**Cường độ massage khí**

Nhấn để chọn cường độ massage áp suất khí ưa thích của bạn. Có 3 mức cường độ.

**Nút nâng vị trí massage**

Nhấn nút này để di chuyển cơ chế massage đi lên. Nút này có thể áp dụng cho massage từng phần.


**Nút hạ vị trí massage**

Nhấn nút này để di chuyển cơ chế massage đi xuống. Nút này có thể áp dụng cho massage từng phần.

2. Loa Bluetooth

Khi bật công tắc nguồn ở sau lưng ghế (đến “I”), loa Bluetooth (có thể thấy là “Music Station”) của ghế sẽ tự động được bật. Nhạc của thiết bị điện tử của bạn trong phạm vi có thể sau đó sẽ được bật thông qua kết nối Bluetooth (ghép nối với từng thiết bị điện tử bằng password “0000” hoặc “1234”).

Khi tắt công tắc nguồn (về “O”), loa Bluetooth sẽ bị ngắt kết nối.

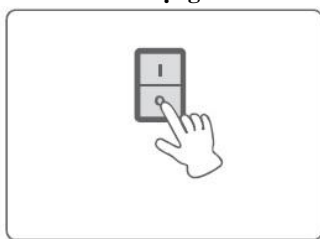3. Sau khi sử dụng

1) Nhấn nút On/Off để vô hiệu tất cả các chức năng trước khi đặt bộ điều khiển từ xa vào túi đựng bộ điều khiển.

2) Tắt công tắc nguồn (về “O”) nằm ở sau lưng ghế.

3) Rút phích cắm khỏi ổ điện.

* **Không được kéo dây nguồn để rút phích cắm.**

18. Sản phẩm có bề mặt nóng, người không có cảm giác với nhiệt nên chú ý khi sử dụng.

19. Thời gian sử dụng cho một người là nên trong khoảng 30 phút/ngày.

20. Sức chứa tối đa là 100kg. Nếu quá 100kg, sẽ khiến sản phẩm hư hỏng vĩnh viễn.

21. Luôn giữ cho sản phẩm sạch sẽ và không bao giờ gắn bất cứ vật gì vào các kẽ ghế và xung quanh sản phẩm.

22. Sản phẩm được thiết chỉ sử dụng cho hộ gia đình.

23. Không đứng, ngồi hoặc nhảy lên phần đế chân khi sản phẩm đang được sử dụng để tránh bất kỳ tổn thương hoặc hư hỏng nào.

24. Không cố đứng lên phần tựa lưng và tay vịn để tránh bất kỳ tổn thương nào cho người.

25. Hãy tháo tất cả phụ kiện khỏi cơ thể trước khi sử dụng.

Lưu ý:


- Sản phẩm này không được dùng cho những người bị suy giảm cảm giác vật lý hoặc thần kinh, hay thiếu kiến thức và kinh nghiệm, trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Nếu dây nguồn bị hư hại, bộ phận này cần được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý ủy quyền hoặc người đủ khả năng, nhằm tránh nguy hiểm.
- Sản phẩm sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng, người nhạy cảm với nhiệt cần thận trọng khi sử dụng thiết bị.
- Trẻ em không nên chơi đùa với sản phẩm.
- Việc làm sạch và bảo trì không nên giao cho trẻ em làm nếu không có sự giám sát.

Trường điện từ (EMF)


Sản phẩm này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các trường điện từ (EMF).

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Nhìn nghiêng

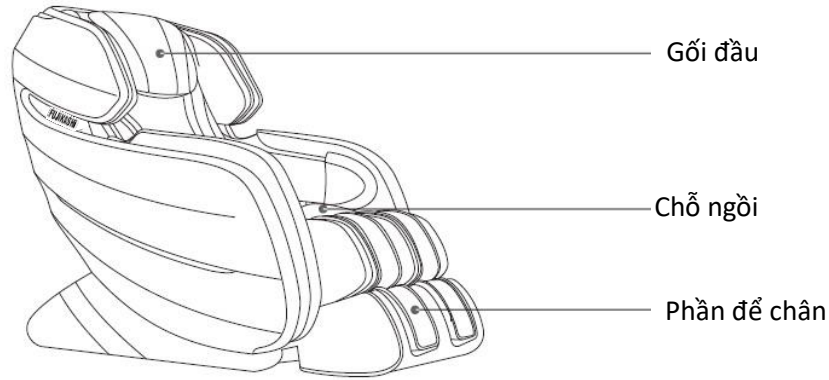

Nhìn từ phía sau

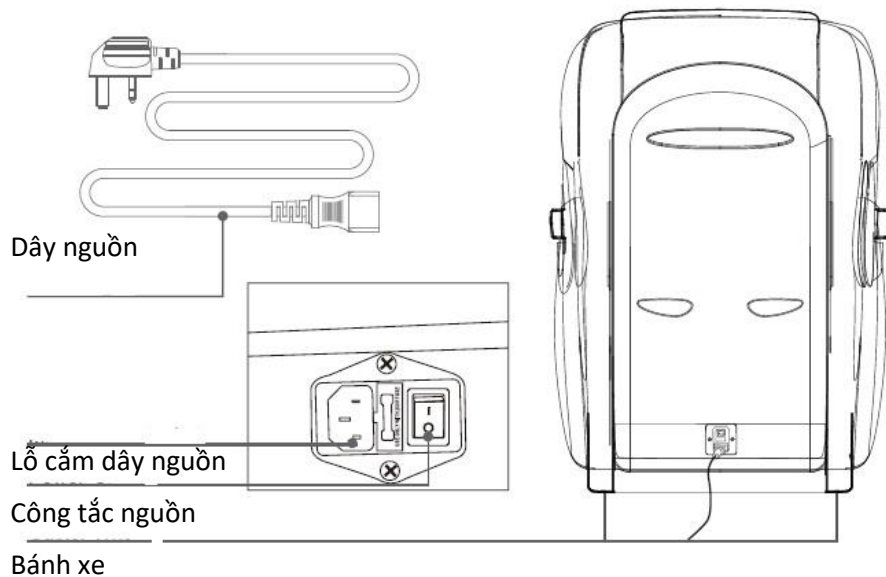

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Mô tả chức năng của Bộ điều khiển từ xa

Nút On/Off



Nhấn một lần để vào chế độ chờ trước khi tiếp tục chọn chương trình massage Tự động hoặc thiết lập Thủ công. Nhấn nút lần nữa để dừng chức năng massage hiện tại và quay trở về chế độ chờ.

Nút tạm dừng



Nhấn nút này để dừng các chức năng hiện tại. Nhấn nút lần nữa để tiếp tục hành động trước khi dừng.

Nút Chương trình massage tự động



Nhấn nút này để chọn 4 chương trình massage cụ thể: Toàn thân, Ngủ, Kéo giãn, Đong đưa.

Nút Chế độ massage Vai & Cổ



Massage cho vai và cổ. Sau khi nhấn nút này, chương trình massage tự động sẽ dừng lại.

Nút Chế độ massage Thất lưng & Hông



Massage cho thất lưng và hông. Sau khi nhấn nút này, chương trình massage tự động sẽ dừng lại.

Nút Chế độ con lăn bàn chân



Nhấn một lần để bàn chân được con lăn massage.

Hẹn giờ



Nhấn một lần để vào phiên hẹn giờ tự động 5 phút, và cứ thế tiếp tục.

Nút nhiệt



Nhấn một lần để bắt đầu massage nhiệt trên thất lưng.

Nút nâng phần đế chân lên



Nhấn và giữ nút này để di chuyển phần đế chân lên trên.

Nút hạ phần đế chân xuống



Nhấn và giữ nút này để gác vào phần đế chân.

Nút hạ phần tựa lưng



Nhấn và giữ nút này để ngả vào phần tựa lưng.

Nút nâng phần tựa lưng




Nhấn và giữ nút này để dựng phần tựa lưng lên.

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA




MÔ TẢ SẢN PHẨM

Các bộ phận bên trong

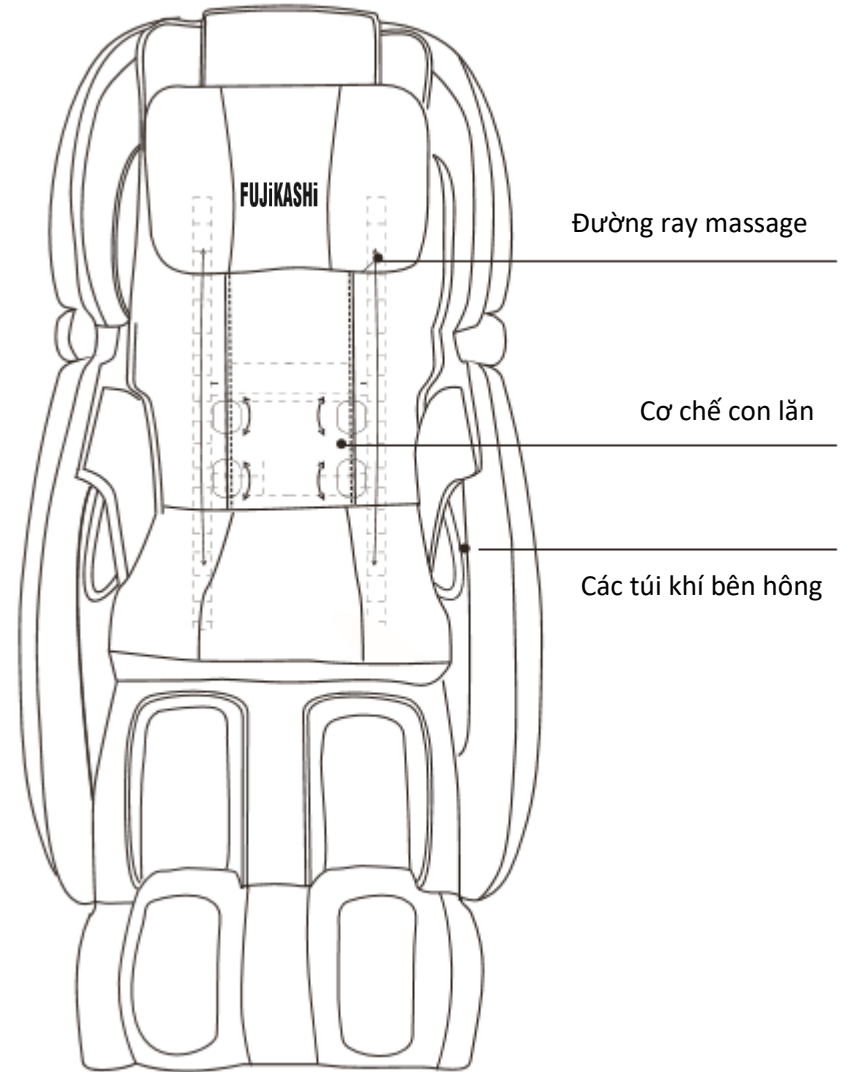

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

2. Đặt ghế ở khu vực khu vực mở

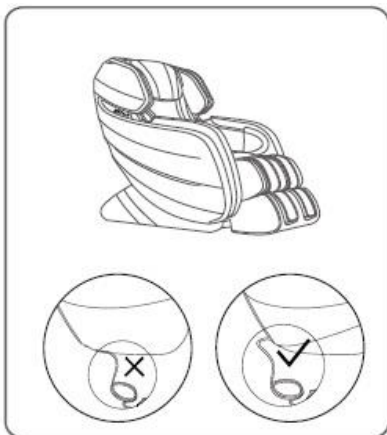


- Cho phép không gian xung quanh ghế vừa đủ cho mục đích dựa ngả vào.
- Để tránh làm hư hỏng sàn nhà và giảm tiếng ồn, hãy đặt một tấm thảm trải sàn ở dưới ghế.
- Đảm bảo rằng không có chướng ngại vật nào ở trước và sau ghế.
- Không đặt ghế ở nơi ẩm ướt hoặc sàn không bằng phẳng.
- Để tránh nhiễu tín hiệu, hãy đặt ghế cách xa tivi hoặc đài radio 1 mét.

Cảnh báo:

Không được để dây nguồn ở dưới ghế, vì khi ghế chuyển động có thể làm hư hỏng dây nguồn!

3. Di chuyển ghế

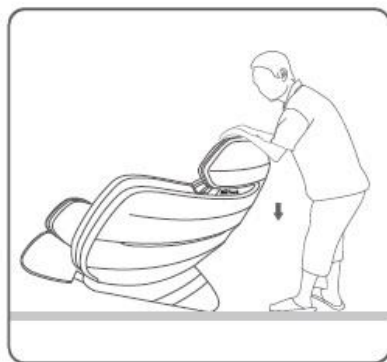


- 1) Như minh họa, đẩy phần tựa lưng thấp xuống và nghiêng ghế lên trên bánh xe của nó thành góc 45°.
- 2) Từ từ đẩy và di chuyển ghế đến vị trí mong muốn.
- 3) Hạ ghế từ từ và nhẹ nhàng cho đến khi nó hoàn toàn nằm trên mặt đất.

Cảnh báo:


- Không di chuyển ghế khi có người ở trên hoặc trong khi đang sử dụng.
- Việc di chuyển ghế có thể gây hư hỏng sàn.
- Bảo vệ sàn như được khuyến cáo (ví dụ: tấm lót hoặc thảm trải sàn).
- Không làm rơi hoặc thả đột ngột ghế khi đang di chuyển, điều đó có thể gây hư hỏng ghế.
- Trong khi di chuyển ghế nên có hai người và quan tâm hơn nếu cần thiết.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

1. Tháo bỏ bao bì và lấy ghế cùng phụ tùng ra


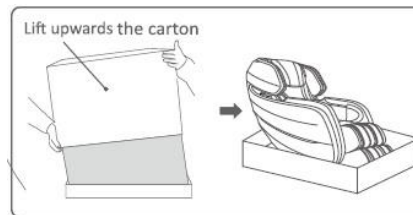


- 1) Tháo bỏ thùng carton. Lấy ghế ra.
- 2) Lắp gối đầu và vỏ bọc tựa lưng.
- 3) Lấy phần đế chân ra, loại bỏ vật bảo vệ chân.

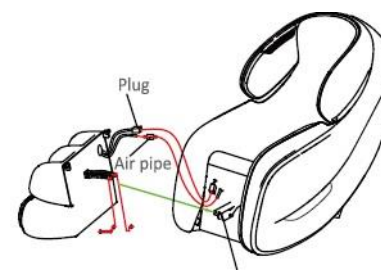

- 4) Nới lỏng dây trong phần đỉnh tán khớp nối chân. Kết nối phần ống ở chân với ống dẫn khí của chỗ ngồi và kết nối hai đầu vào phích cắm.

- 5) Mở bao bì phụ kiện và khóa vào chận khóa chân trong giá bằng sắt ở cả hai bên chân.

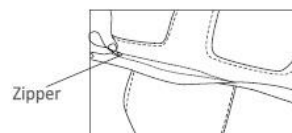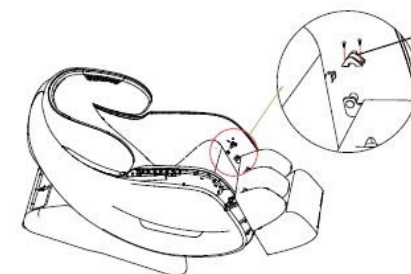

- 6) Nới ghế ngồi bằng khóa kéo của khớp nối chân. Căn chỉnh vỏ bọc ghế ngồi và bắt đầu massage.